

Endlich wieder lieferbar

www. **IONICKISS**™ .net  
アイオニック

**Fit Sein**  
Gesundheitsprodukte  
Produktinformation

## Wie funktioniert die IONICKISS Zahnbürste?

Wir präsentieren Ihnen die revolutionäre IONIC Zahnbürste, die zu Ihrem unermüdlichen Helfer im Kampf gegen Zahnbelag wird. Dank der einzigartigen japanischen Technologie haben Sie sauberere und auch gesündere Zähne und Zahnfleisch.



Plaque und daraus resultierend Zahnstein sind die beiden häufigsten Probleme bei der Mundhygiene.

Die im Zahnbelag enthaltenen Bakterien produzieren u.a. Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und so über einen längeren Zeitraum Karies verursachen können.

Plaque greift u.a. das Parodontium, also den Zahnhalteapparat, an und beschädigt damit die Verankerung der Zähne im Kieferknochen. Das Parodontium besteht aus verschiedenen Strukturen, die den Zahn mit dem Kieferknochen verbinden (Zahnfleisch, Wurzelhaut und Wurzelzement, Knochen).

Angesammelte Plaque, die nicht entfernt wird, verhärtet durch die Einlagerung von Mineralien und wird so zu gelblich-bräunlichem Zahnstein.

### IONIC - EIN JAPANISCHER SAMURAI DER ZAHNPLAQUE REDUZIEREN HILFT

Mit der IONIC Zahnbürste haben Sie die Möglichkeit Ihre Zähne bis zu 48% sauberer zu halten, auch an schwer zugänglichen Stellen. Außerdem ist es nicht unbedingt notwendig, Zahnpasta zu verwenden.

Es ist klinisch erwiesen, dass die IONIC -Zahnbürste viel effektiver ist als eine normale manuelle Zahnbürste, und Benutzer berichten von saubereren und glatteren Zähnen ohne Plaque, wenn sie ihren Zahnarzt aufsuchen.

Die IONIC Handzahnbürste ist ein konkurrenzloser Helfer im Kampf gegen Zahnbelag. Die patentierte japanische Technologie bewirkt, dass die Plaque von der Oberfläche Ihrer Zähne abgestoßen wird, ähnlich wie bei der Verwendung eines Magneten.

Wenn Sie eine manuelle ionische Zahnbürste mit der richtigen Zahnreinigungstechnik kombinieren, sorgen Sie nicht nur für einen gesunden und frischen Mund, sondern auch für das hellste Lächeln.

Jüngste wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass die Gesundheit und Sauberkeit unseres Mundes unsere allgemeine Gesundheit mehr beeinflusst, als wir bisher dachten. Investieren Sie in Ihre Gesundheit und nutzen Sie durch IONIC eine der effektivsten Zahnpflege Methoden. Genießen Sie natürlich gesündere Plaque-freiere Zähne.

## WIE FUNKTIONIERT ES?

### VOR DER REINIGUNG


Alles in der Natur hat eine ionenbasierte Polarität.



Plaque hat eine positive Ladung (+) und die Zahnoberfläche hat eine negative Ladung (-).

Entgegengesetzte Polaritäten sind der Grund, warum die Oberfläche der Zähne Zahnbelag anzieht und daher mittels einer ionischen Bindung an den Zähnen haftet.

### WÄHREND ZAHNREINIGUNG

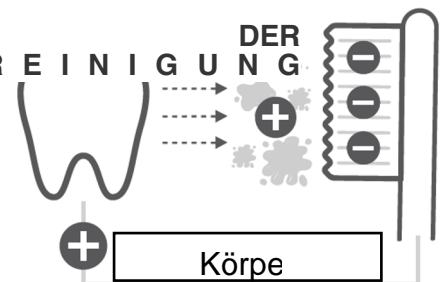

Die IONIC Zahnbürste hat eine kleine Lithiumbatterie, die in den Zahnbürstengriff eingebaut ist. Die Batterie ist mit einem Titanstab (Elektrode) verbunden, der durch die Zahnbürste führt.

Am Zahnbürstengriff befindet sich ein dünner Ionencclip aus Metall.

Vor der Zahnreinigung müssen Sie die Finger befeuchten, die mit dem Metallclip (ION-Kontakt) in Kontakt kommen. Durch die Feuchtigkeit entsteht ein geschlossener Kreislauf, in dem negative Ionen erzeugt werden.

Durch diese Ionisierung wird die Ionenbindung zwischen der Plaque und dem Zahn gestört und dadurch die Plaque von der Zahnoberfläche in Richtung Bürstenkopf abgestoßen.

Wenn Eltern ihren Kindern beim Zähneputzen helfen, muss ein Körperkontakt zwischen Elternteil und Kind sichergestellt werden (z. B. die Hand oder den Kiefer halten), damit sich der elektrische Stromkreis schließt und die Ionisierung ordnungsgemäß funktioniert.

## EFFIZIENTE AUSTAUSCHBARE BÜRSTENKÖPFE

IONIC Zahnbürsten haben austauschbare Köpfe verschiedener Typen und Härten, so dass Sie nach Ihren Wünschen wählen können. IONIC Zahnbürsten nützen nicht nur Ihren Zähnen, sondern auch Ihrem Geldbeutel, da Sie nicht die gesamte manuelle Bürste wechseln müssen, sondern nur den Kopf (*Hinweis: Zahnärzte empfehlen, den Bürstenkopf alle 2-3 Monate oder immer nach einer Krankheit zu wechseln*).

\* Klinische Bewertung der ionischen Zahnbürste zur Entfernung von Plaque und zur Reduzierung von Gingivitis (Englisch, November 1996), Marquette University, School of Dentistry: Ronald L. Van Swol, Donald E. Van Scotter, Jeffrey J. Pucher, Andrew R. Dentino


## So verwenden Sie die manuelle Zahnbürste IONICKISS ORIGINAL und KIDS

### BESCHREIBUNG DER IONIC ZAHNBÜRSTE

- 1 Die Borsten** - der IONIC Zahnbürsten werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Hochwertige Borsten entfernen alle Bakterien.
- 2 IONIC austauschbare Zahnbürstenköpfe** - Austauschbare Bürstenköpfe sorgen für die lange Lebensdauer Ihrer Zahnbürste. Sind die Bürstenfasern abgenutzt (i.d.R. nach 2-3 Monaten), ersetzen Sie ihn einfach durch einen neuen Bürstenkopf und Ihre IONIC ist wieder wie neu.
- 3 ION-KONTAKT (Metallband)** - ist der Metallclip, den man beim Zähneputzen mit den befeuchteten Fingern berühren muss, hier sitzt die Batterie um Ionen zu erzeugen.

In der Kinderbürste wird der ION-Kontakt Metallclip durch ein leitfähiges Material ersetzt (thermoplastischer Verbundstoff auf der Rückseite des Bürstengriffs). Die Ionisierung funktioniert dadurch auf dieselbe Weise wie bei der Erwachsenenbürste.

- 4 BATTERIETEST-TASTE** - Drücken Sie die Batterietesttaste, in der Regel ca. ein- oder zweimal pro Monat, um sicherzustellen, dass die Batterie funktioniert. Die Batterie hält bei normalem Gebrauch ca. 2 Jahre. Wenn die LED leuchtet (rot für den ORIGINAL-Typ und grün für den KIDS-Typ), funktioniert die Batterie und die Ionisierung. Wenn es nicht beleuchtet ist, ersetzen Sie das Griffstück.

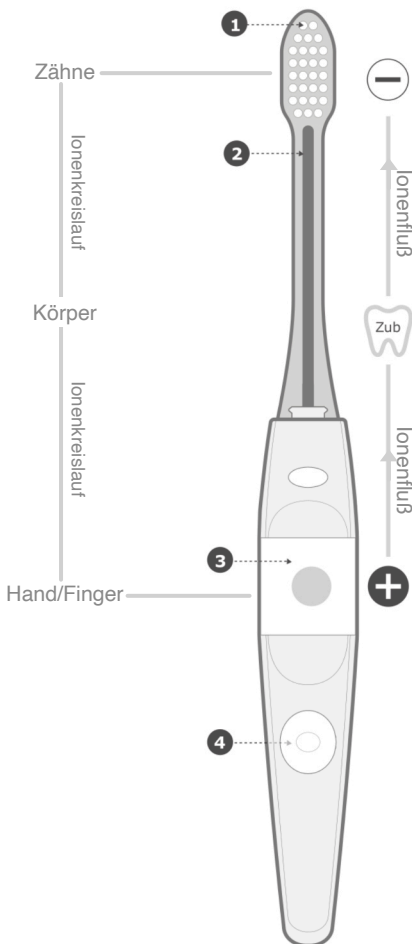

**Fit Sein**  
Gesundheitsprodukte

Am Schulfang 5a • D-84172 Buch  
Telefon: 08709 - 900 4190  
Telefax: 4189

info@fitsein.de

www.fitsein.de

www.IONICKISS.net  
アイオニック

## WIE MAN DIE IONIC RICHTIG BENUTZT

### SCHRITT 1:

Berühren Sie während des gesamten Putzvorgangs den ION-Metallclip mit einem feuchten Finger, um die kontinuierliche Ionisierung sicher zu stellen. Bei der Kinderzahnbürste funktioniert die Ionisierung auf die gleiche Weise, wenn die Bürstenrückseite mit der feuchten Hand umfasst wird.



### SCHRITT 2:

Um den Bürstenkopf auszutauschen, halten Sie die Bürste mit einer Hand und drehen Sie den Kopf vorsichtig mit der anderen Hand. Wenn der Kopf sich löst, ziehen Sie ihn nach oben ab. Den neuen Bürstenkopf führen Sie über den Metallstab und lassen ihn einrasten.



### SCHRITT 3:

Bei der Verwendung von Zahnpasta kann sich Paste in der Lücke zwischen der Elektrode und dem Bürstenkopf absetzen.

Wann immer möglich, reinigen Sie den Bürstenkopf und die Elektrode.



### SCHRITT 4:

Drücken Sie die IONITEST-Taste, um den Batteriestatus zu überprüfen. Prüfen Sie ein bis zweimal im Monat. Drücken Sie beim Zähneputzen nicht auf den Prüftaster (unnötiger Batteriestrom Verbrauch).

Wenn die LED aufleuchtet hat die Bürste genug Energie für den Ionisationsprozess und ist daher voll funktionsfähig. Wenn das Licht aufhört zu leuchten, ist es notwendig, die Bürste durch eine neue zu ersetzen. Die Batterie hält bei normalem Gebrauch ca. 2 Jahre.



**FitSein**  
Gesundheitsprodukte

Am Schulfang 5a • D-84172 Buch  
Telefon: 08709 - 900 4190  
Telefax: 4189

✉ info@fitsein.de

🌐 www.fitsein.de